


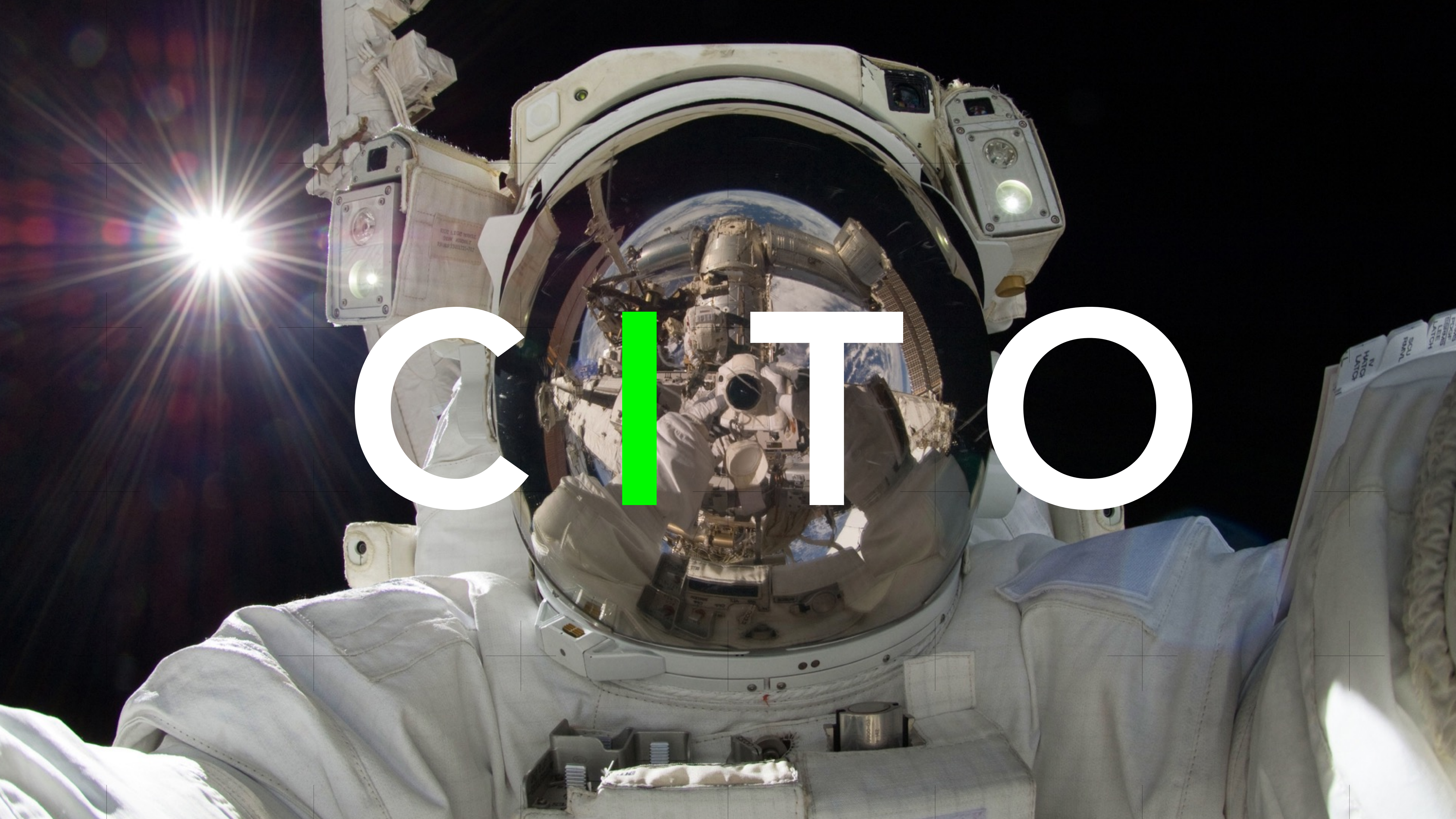

CITCO

CITO mini

Nie szukam, znalazłem.

 DENTAURUM
IMPLANTS

kliknij w obraz i przejdź na YouTube by obejrzeć film

CITO mini®



tiologic® ST

tiologic® ST
shorty

Wąski. Szybki. Prosty.





wypolerowana szyjka dziąsłowa


optymalne podparcie tkanek miękkich

drobny gwint w obszarze kortykalnym

powierzchnia SLA, piaskowana i wytrawiana

geometria gwintu zoptymalizowana MES¹

gwint samonacinający

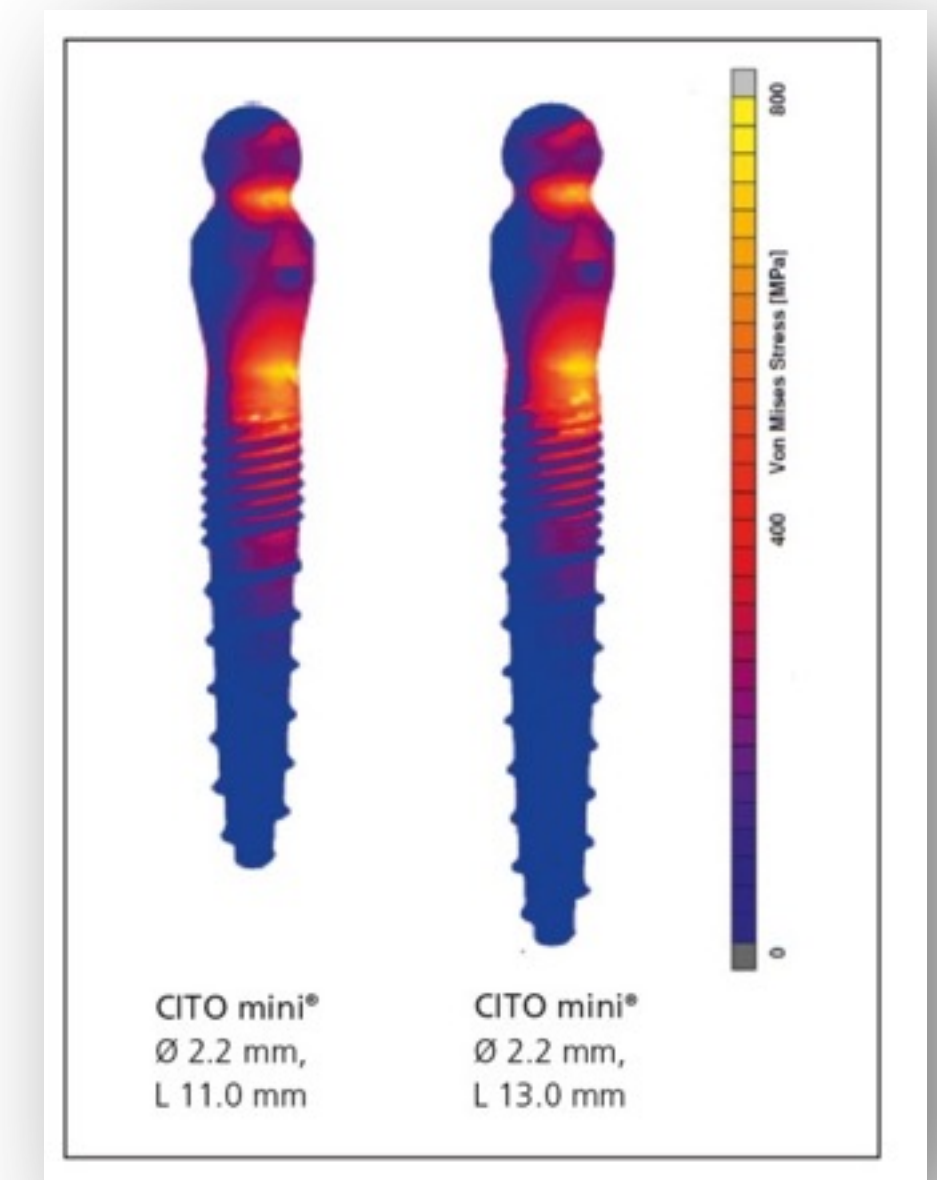

¹L.Hasan, C.Bourauel:
Biomechaniczne badania wpływu zmiany geometrii
gwintu implantu CITO mini®. Uniwersytet Bonn 2014.

CITO mini® system implantacji.

3 średnice:


- 1.8 mm
- 2.2 mm
- 2.5 mm

2 długości:

- 11.0 mm
- 13.0 mm

średnica головки:

- 1.8 mm

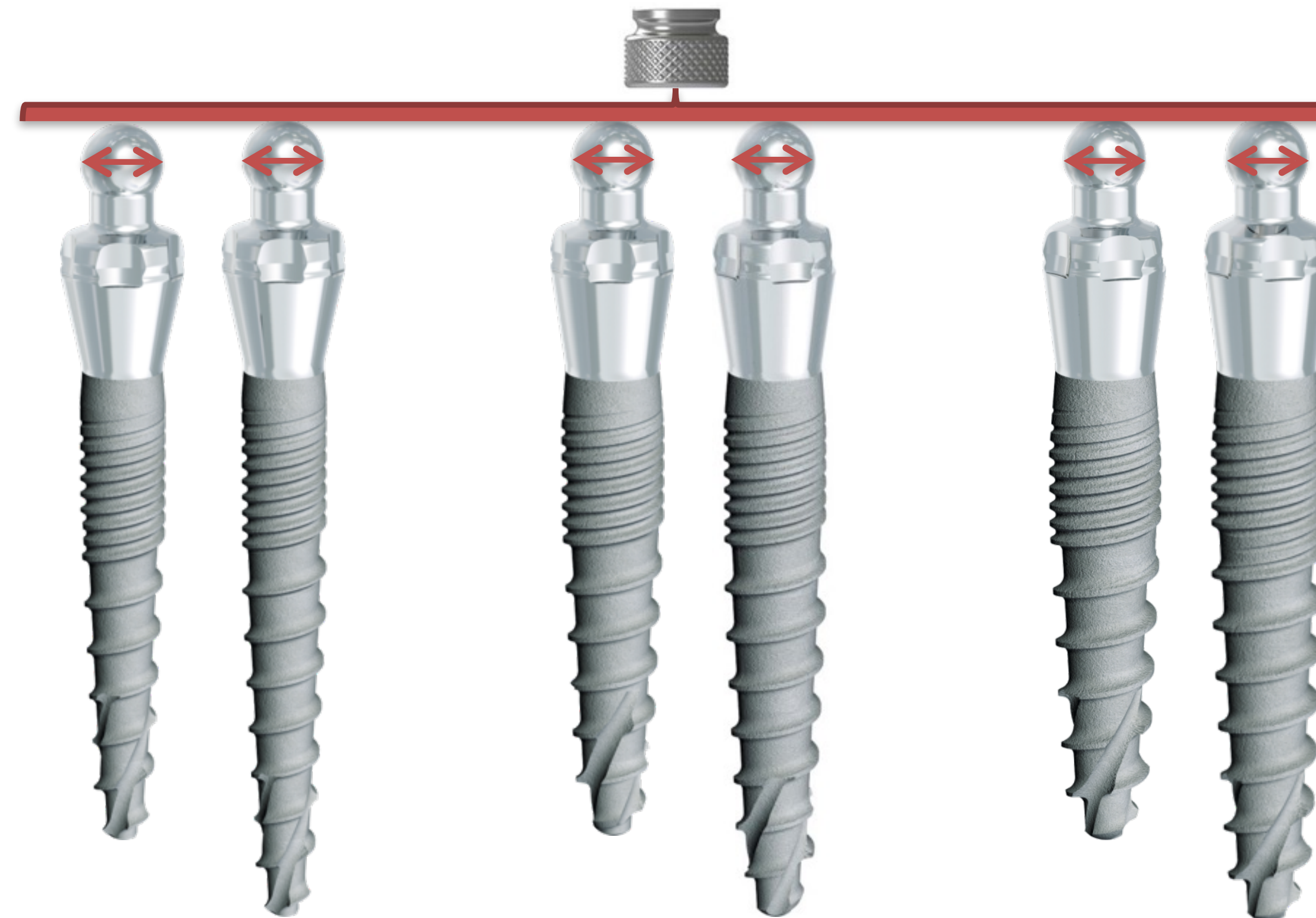


CITO mini[®] system implantaciji.**303-022-13**

1.8 mm

2.7 mm


2.2 mm

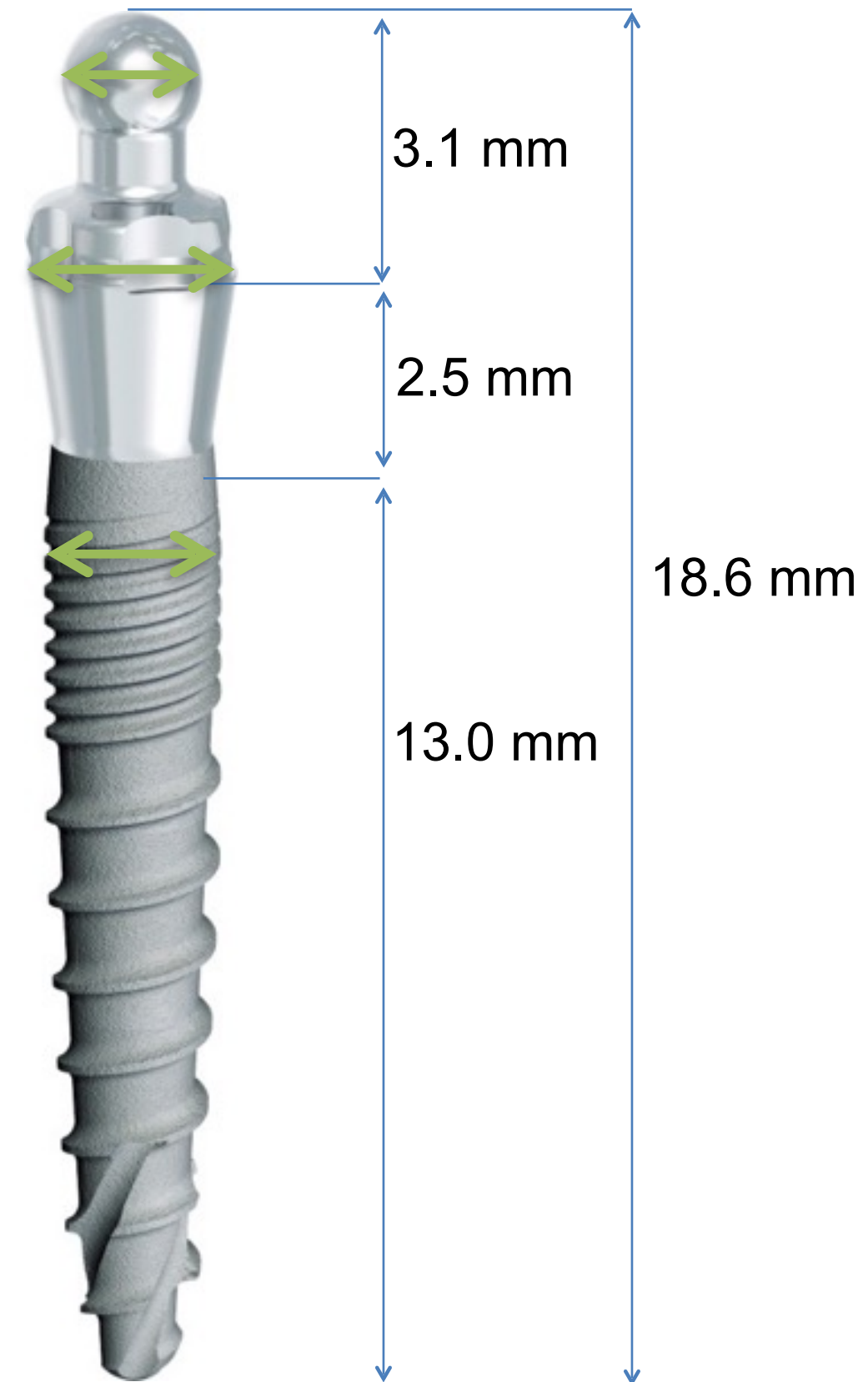**303-022-11**


1.8 mm

2.7 mm

2.2 mm

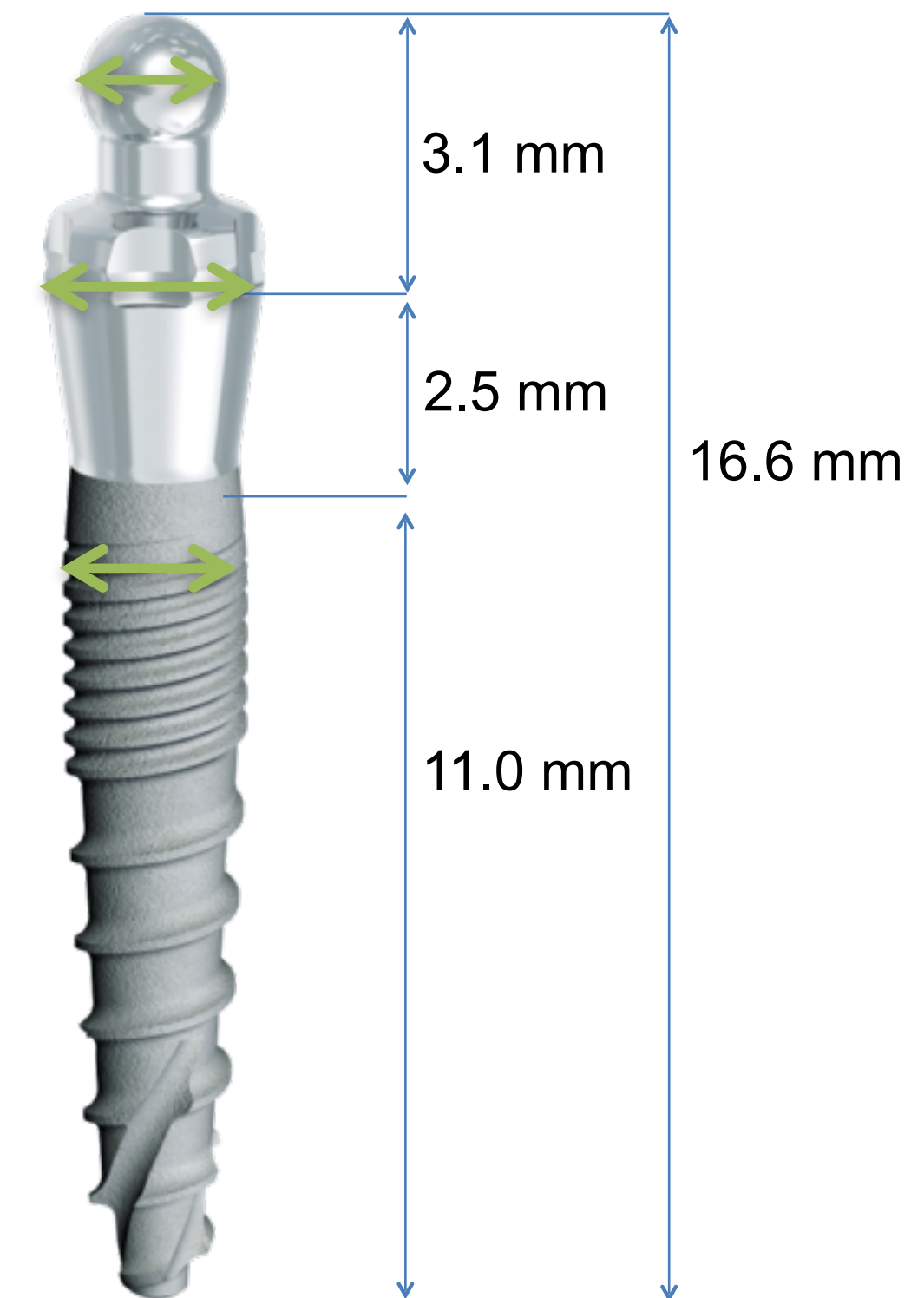

3 kroki do wprowadzenia

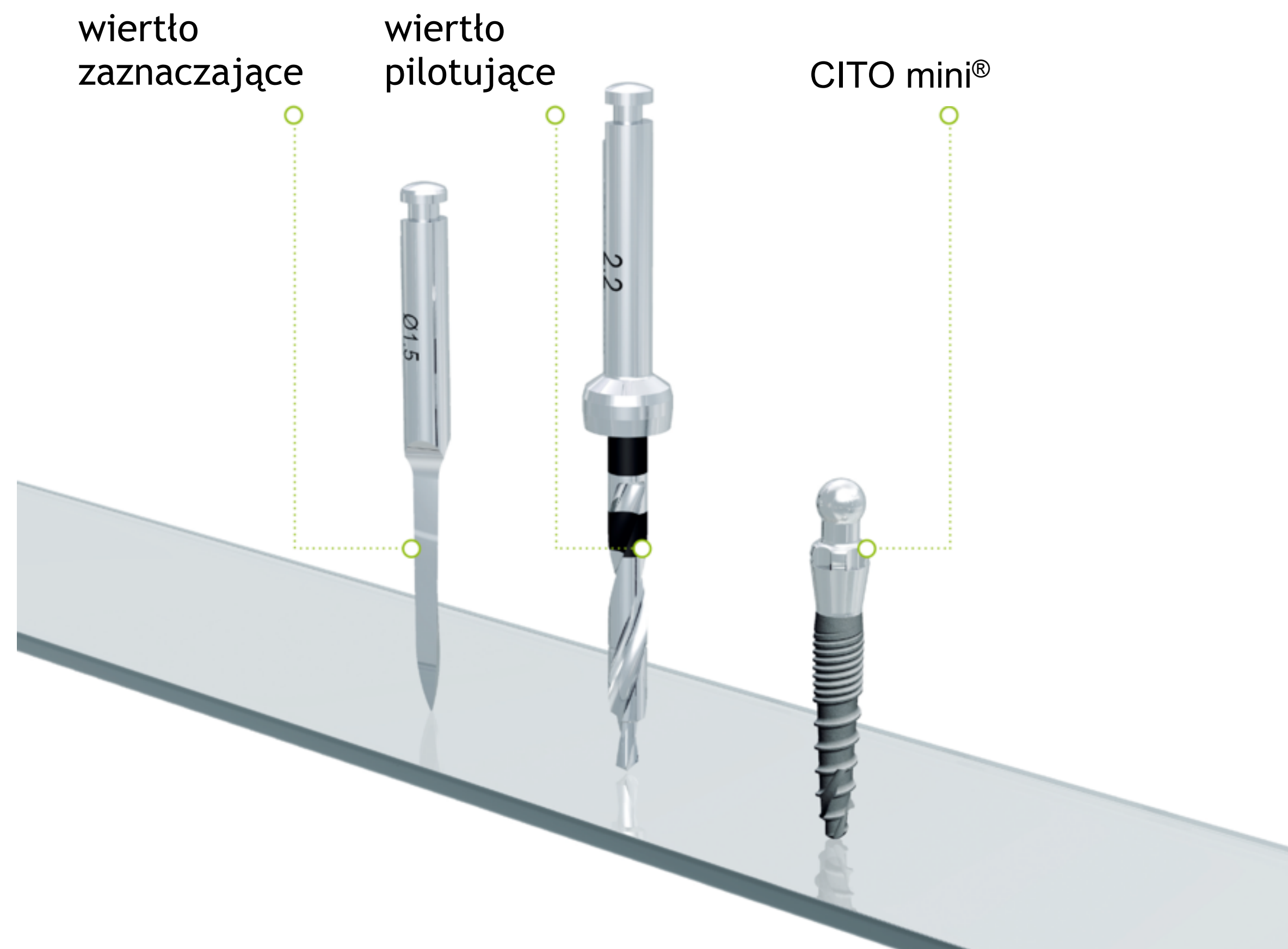

3 kroki do wprowadzenia

Opcjonalnie



3 kroki do wprowadzenia


Krok 1:



Krok 2:



Krok 3:

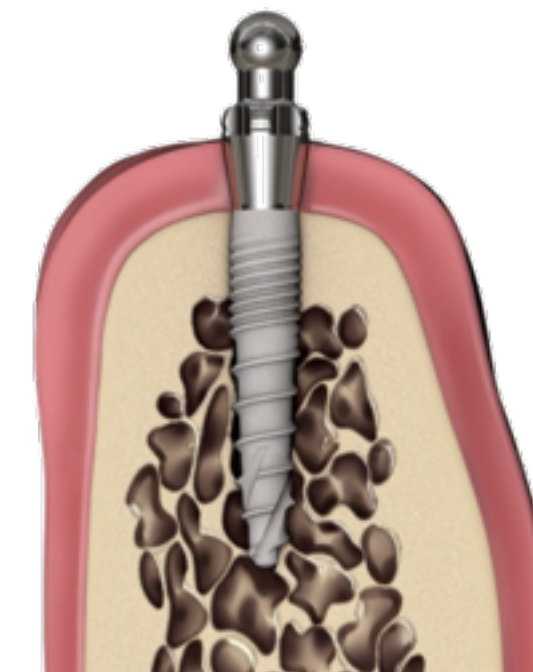

		miękka			średnia			twarda		
		1.8	2.2	2.5	1.8	2.2	2.5	1.8	2.2	2.5
2.2 13 mm 11 mm 6 mm twarda kość średnia kość	wiertło zaznaczające				X	X	X	X	X	X
	wiertło pilotujące 1.8				min. 6 mm			X		
	wiertło pilotujące 2.2				min. 6 mm				X	
	wiertło pilotujące 2.5				min. 6 mm					X
		wprowadzanie implantów CITO mini			w miękką kość			nie jest wskazane		

➔ 1.8 implant nie jest wskazany do implantacji w szczęcie.

➔ Głębokość nawiercania pilotującego uzależniona jest od pożądanej stabilizacji pierwotnej implantu, przy uwzględnieniu twardości kości. Implanty

➔ Jeżeli przy wkręcaniu implantu, moment obrotowy przekroczy 45 Ncm, należy wykręcić implant i poszerzyć nawiert wiertłem pilotującym o większej średnicy.

kaseta CITO mini®.


- Zredukowana liczba instrumentów
- Protokół chirurgiczny, dopasowany do twardości kości.

Kaseta **NIE** zawiera:

- klucza dynamometrycznego
- Adaptera klucz dynamometryczny/ISO HEX



Nowa koncepcja opakowania

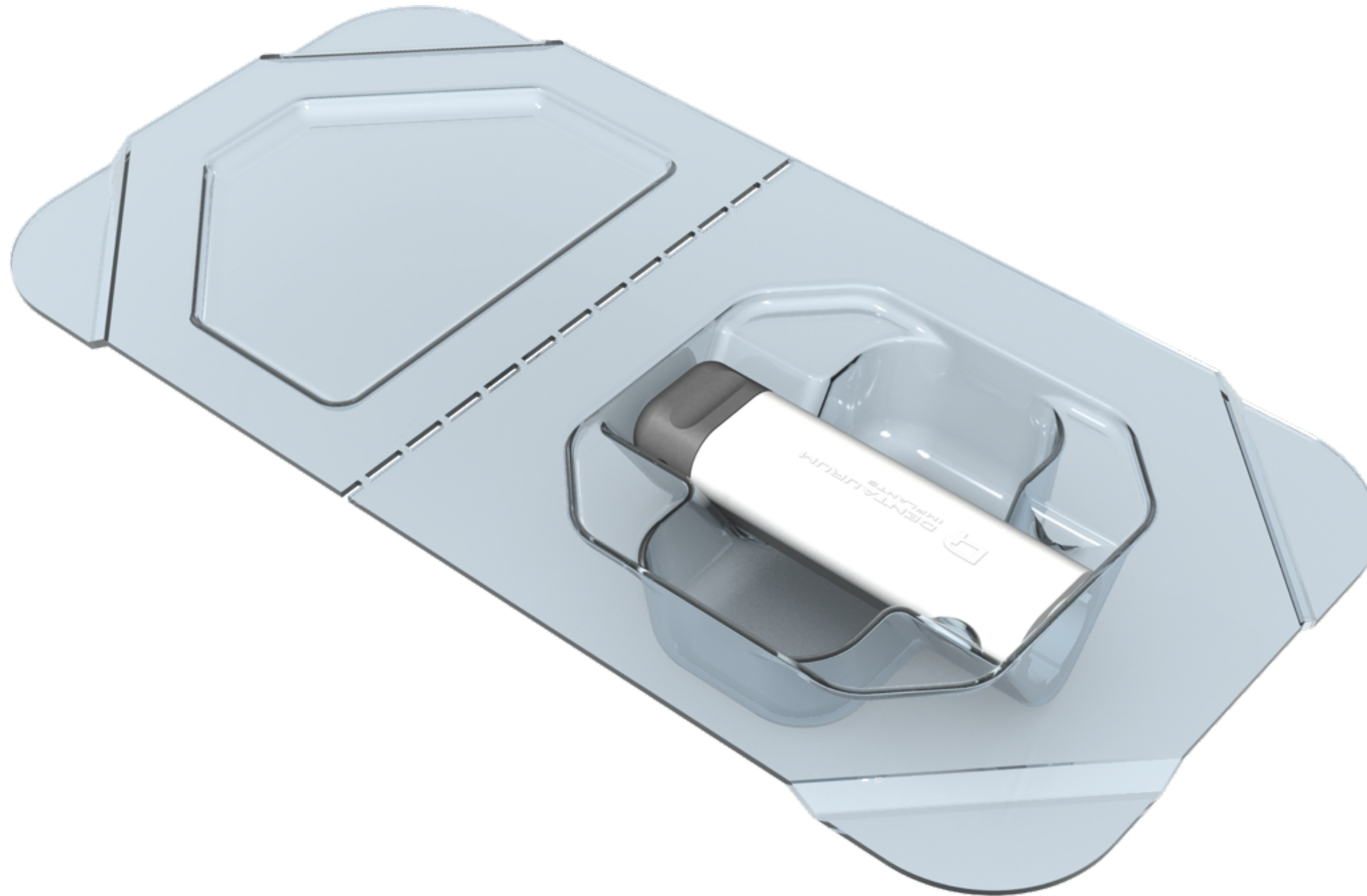


Nowa koncepcja opakowania




O-Ring Matryca CITO mini®.


O-Ring Matryca 1

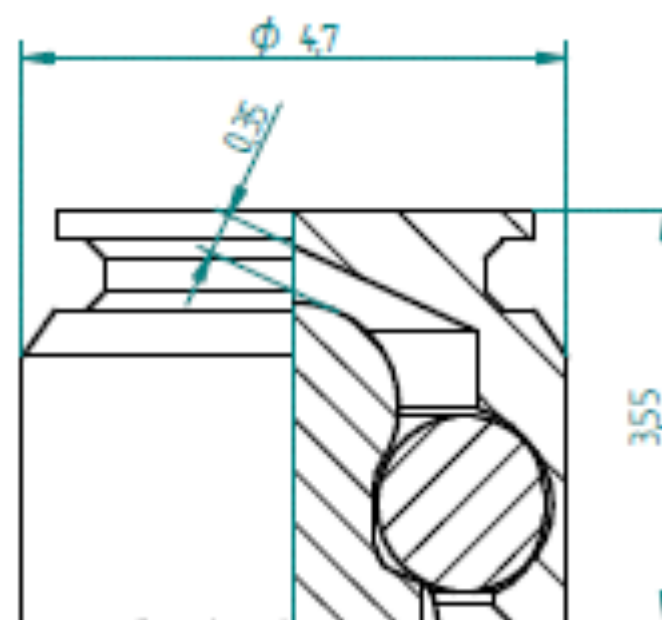




O-Ring Matryca 2

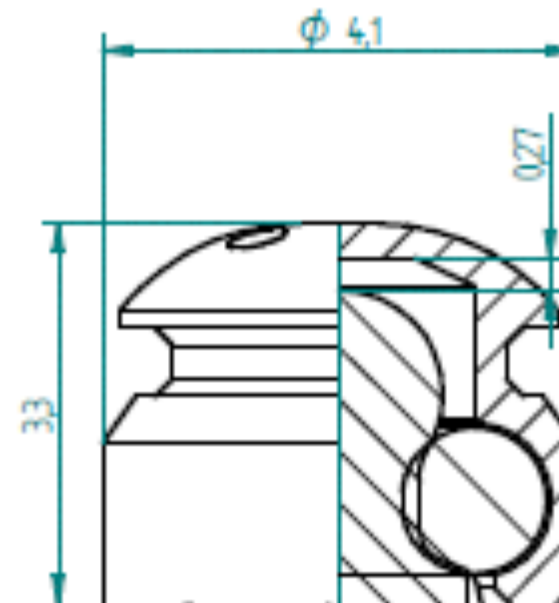

O-Ring Matryca 3

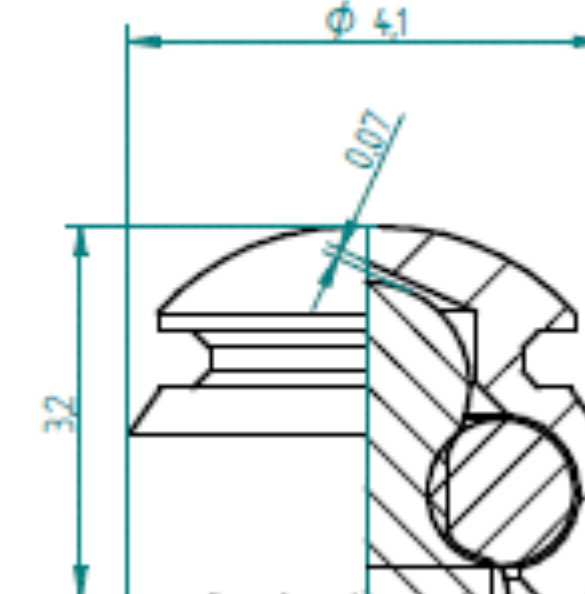


O-Ring Matrix CITO mini®.

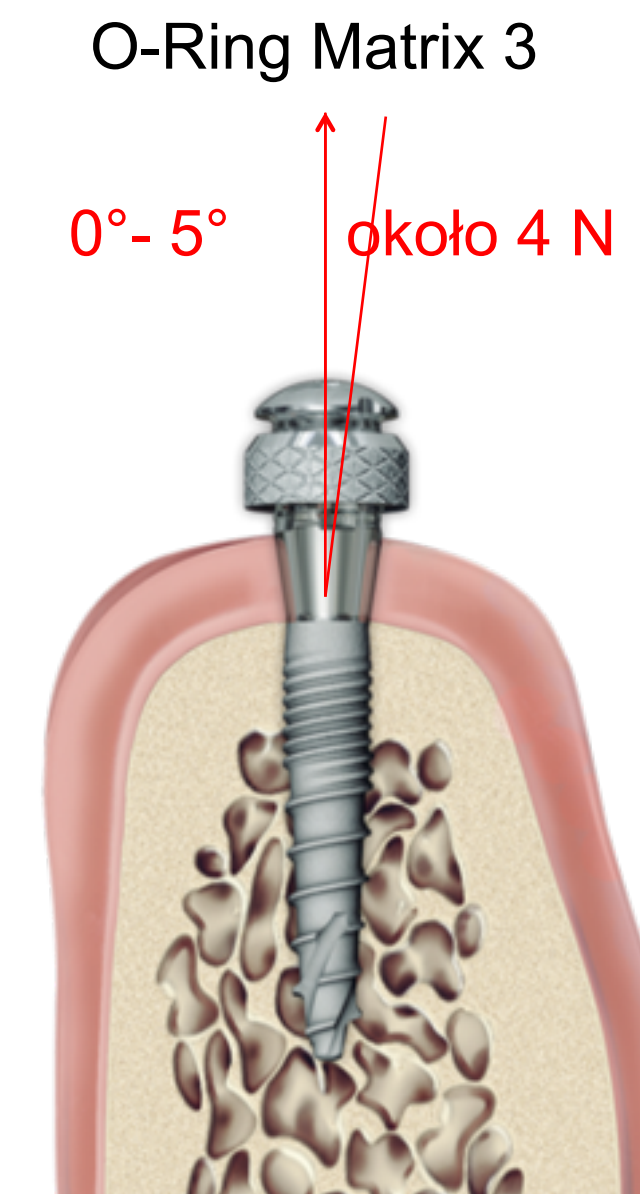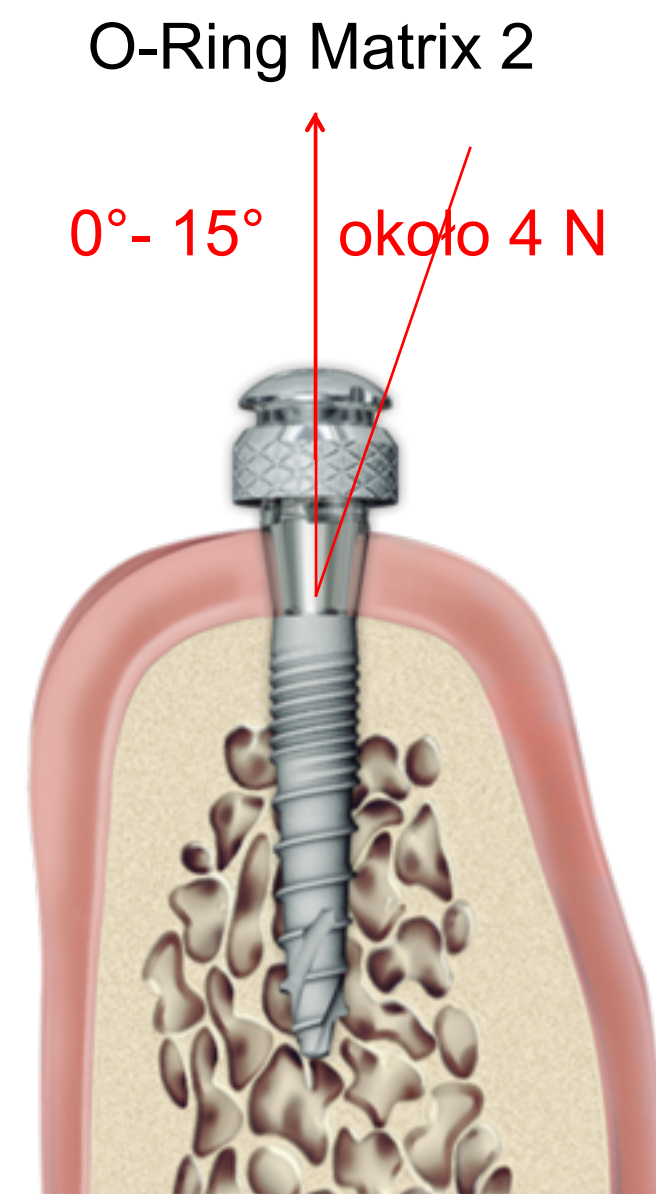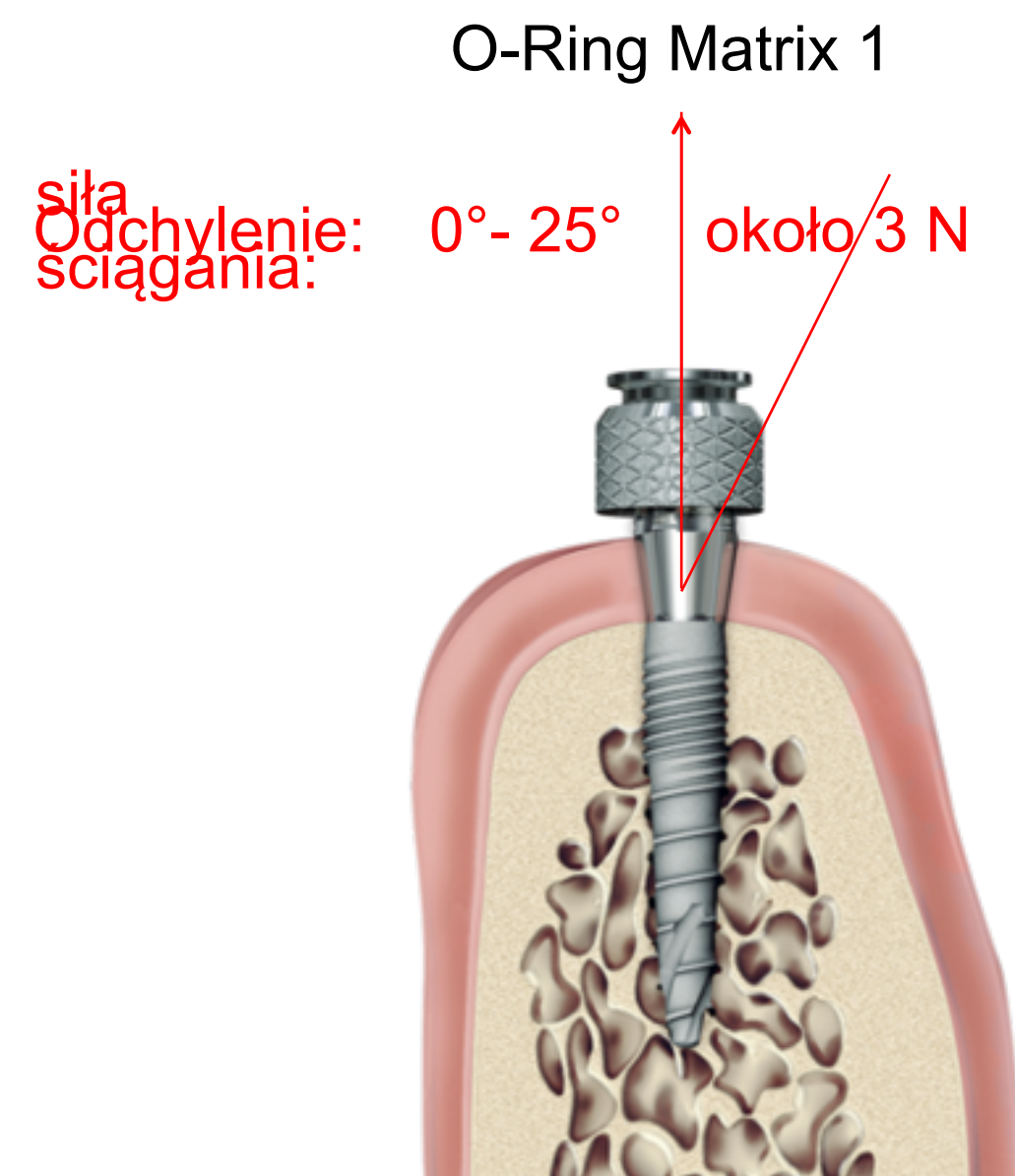


O-Ring Matrix CITO mini[®]. Oznaczenia.


O-Ring Matryca 1

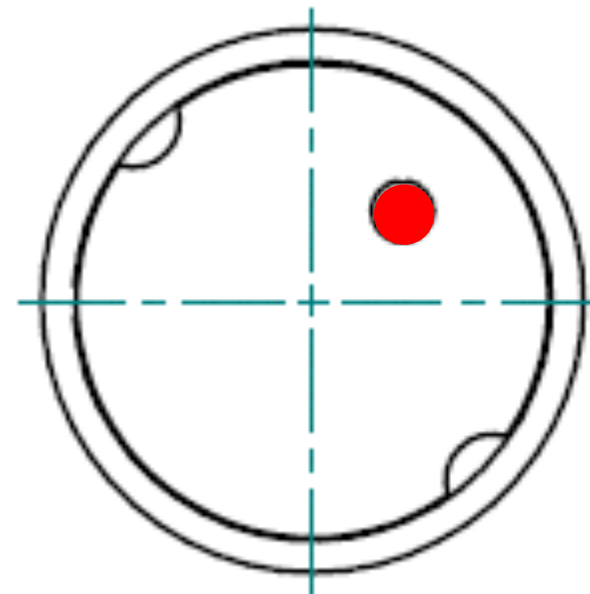

O-Ring Matryca 2

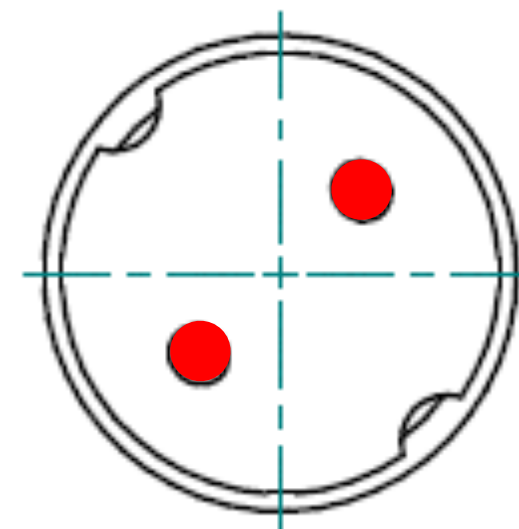

O-Ring Matryca 3

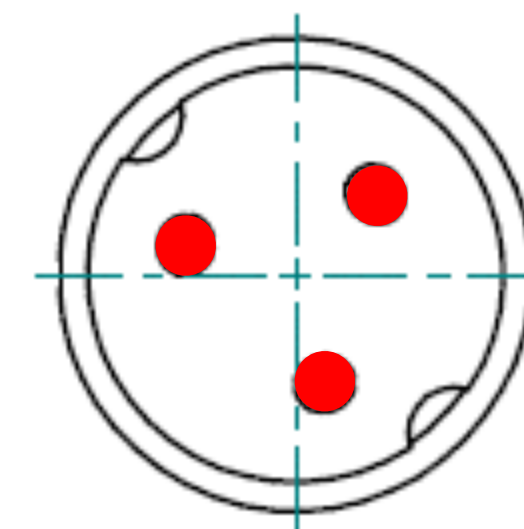

REF 307-000-00 kasetta CITO mini®




zawartość kasety CITO mini®.

instrumenty obrotowe

REF 382-015-00	wiertło zaznaczające Ø 1.5 mm	
REF 302-118-00	wiertło pilotujące do Ø 1.8 mm	
REF 302-122-00	wiertło pilotujące do Ø 2.2 mm	
REF 302-125-00	wiertło pilotujące do Ø 2.5 mm	

implanty CITO mini®.

REF 303-018-11	CITO mini® implant Ø 1.8 mm, L 11.0 mm
REF 303-018-13	CITO mini® implant Ø 1.8 mm, L 13.0 mm
REF 303-022-11	CITO mini® implant Ø 2.2 mm, L 11.0 mm
REF 303-022-13	CITO mini® implant Ø 2.2 mm, L 13.0 mm
REF 303-025-11	CITO mini® implant Ø 2.5 mm, L 11.0 mm
REF 303-025-13	CITO mini® implant Ø 2.5 mm, L 13.0 mm

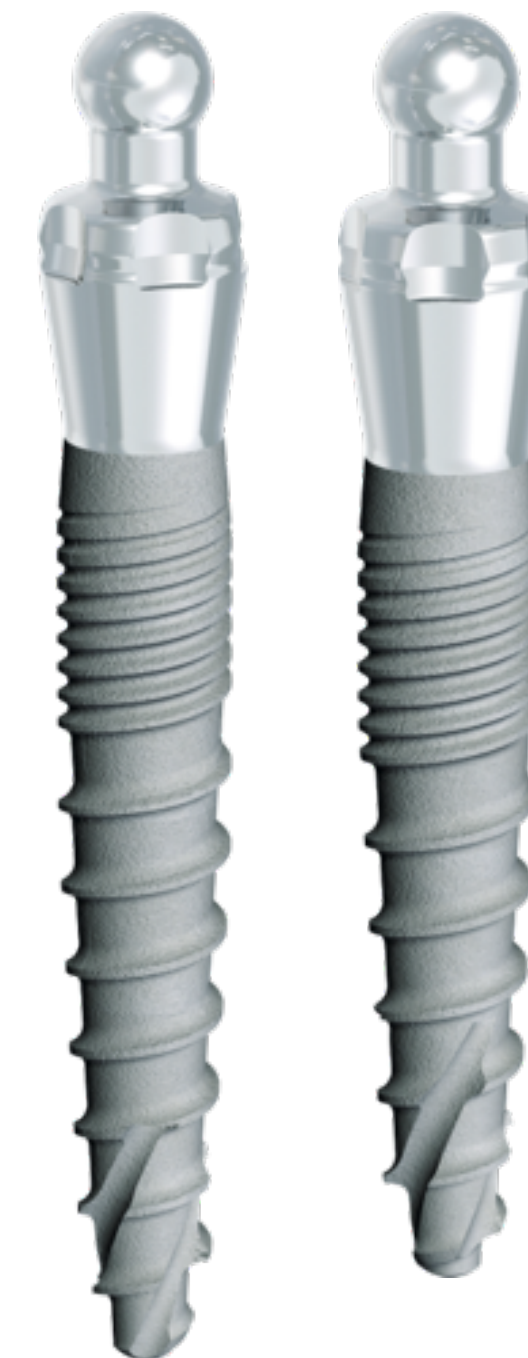

protetyka CITO mini®.**protetyka zatrzask kulowy**

REF 306-614-00 implant laboratoryjny CITO mini®

REF 306-616-00 O-Ring-Matryca 1 CITO mini®

REF 306-618-00 O-Ring-Matryca 2 CITO mini®

REF 306-620-00 O-Ring-Matryca 3 CITO mini®

REF 306-626-00 O-Ringe 1 CITO mini® (wkładka)

REF 306-628-00 O-Ringe 2+3 CITO mini® (wkładka)

REF 306-632-00 Spacer CITO mini®, 10.0 mm
do blokowania podcieni



akcesoria CITO mini®.

chirurgia-protetyka



REF 387-511-00 Adapter klucz dynamometryczny/ISO HEX

REF 307-646-00 PentaGrip ISO HEX do wkręcania implantów

REF 387-700-00 Klucz dynamometryczny z funkcją blokowania

REF 307-001-00 Gingiva Punch, Ø 1.0 mm

REF 301-410-00 Szablon do planowania CITO mini®.

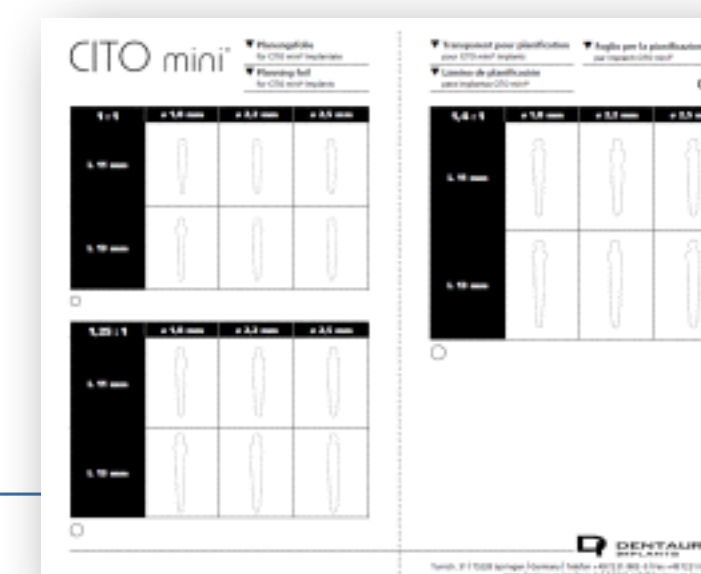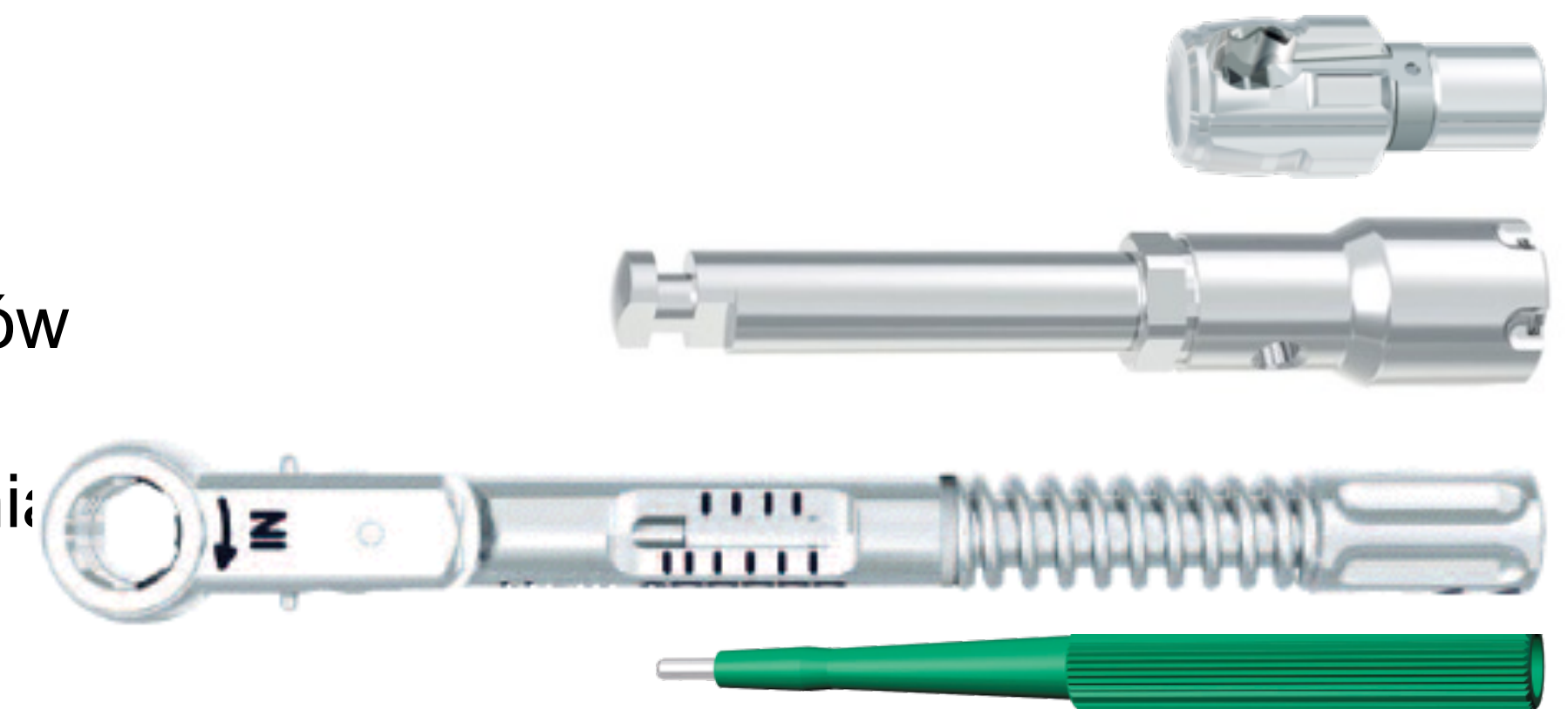


DI – rodzina implantów
już jest pełna

CITO mini[®]



*tio*logic[®] ST

*tio*logic[®] ST
shorty

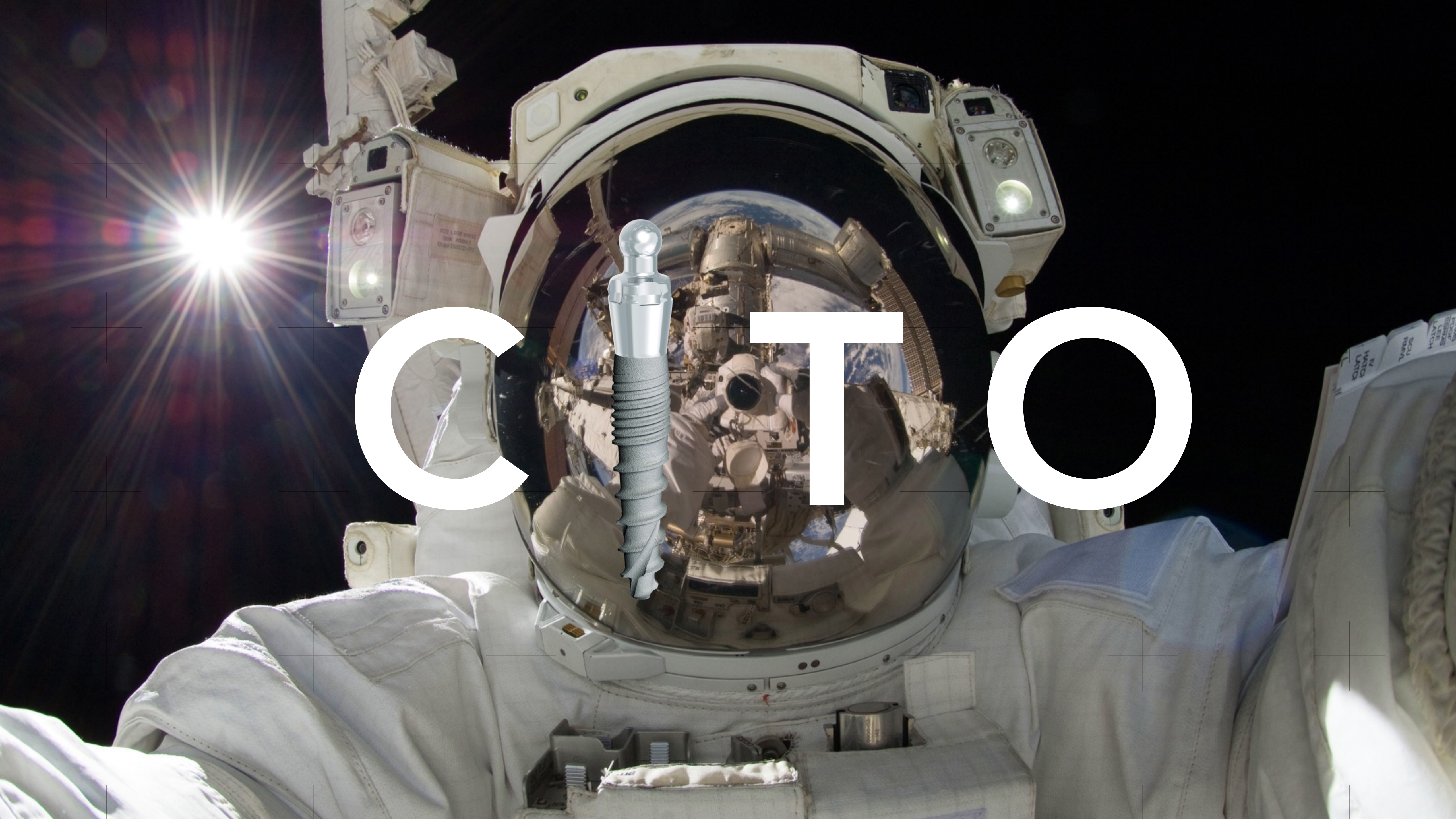

C

T

O